

## Piège à polype - InStream™



### ➤ DISTRIBUTEUR

#### LIFE PARTNERS EUROPE

161 avenue Galliéni – 93170 Bagnole  
Tél. : 01 49 88 01 01 / Fax : 01 48 59 70 72  
E-mail : [life@lifeurope.com](mailto:life@lifeurope.com)  
Site Internet : [www.lifeurope.com](http://www.lifeurope.com)

#### Correspondant matériovigilance

Responsable qualité  
Tél : 01 49 88 01 01  
Fax : 01 49 88 83 45  
E-mail : [quality@lifeurope.com](mailto:quality@lifeurope.com)

### ➤ INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

#### Dénomination commerciale :


#### Piège à polypes – InStream™

Le piège à polypes InStream™ se branche sur l'endoscope et permet de collecter les produits aspirés, notamment lors de la résection de polypes.

- Boîtier de récupération avec tamis qui laisse passer les fluides lors de la première aspiration et limite les pertes d'aspiration lors de la procédure.
- Connecteur Luer-Lock permettant de récupérer aisément le polype avec une seringue.
- 3 fenêtres de visualisation permettent de vérifier la présence du polype sans démontage.



**Indications :** Récupération par l'aspiration des endoscopes des polypes retirés par voie endoscopique

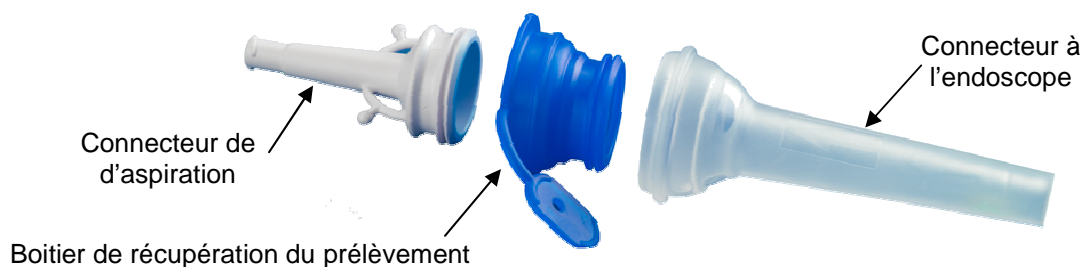

Références	Caractéristiques techniques
US/00711098	Piège à polypes InStream™

Unité de commande = Quantité minimale de livraison (QML) : **50**

Type d'emballage individuel : **Sachet**

Type d'ensemble conditionnement : **Carton**

Produit de classe I - Fabriqué par US Endoscopy (USA) - Marquage CE accordé par BSI, N° d'organisme : 0086- Sécurité d'utilisation, conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Consulter la notice

**Matériaux :**

*Ce dispositif n'est pas en contact avec le patient*

Connecteur d'endoscope : Elastomère thermoformé  
Boîtier de récupération : Elastomère thermoformé et colorant  
Connecteur d'aspiration : ABS et colorant

**Présence de :**

Latex : ☐ Oui ☒ Non  
Produit d'origine animale : ☐ Oui ☒ Non  
PVC : ☐ Oui ☒ Non  
Phtalate et DEHP : ☐ Oui ☒ Non

**Stérilité :**

Stérile : ☐ Oui ☒ Non  
Mode de stérilisation : Aucun  
Nombre d'utilisations : Usage Unique

**Conservation :**

Conditions de conservation : Température ambiante contrôlée (15-25°C)  
Durée de péremption : 3 ans

**Autres données :**

Classement GMDN : 34858  
Présence d'un code barre : ☒ Oui ☐ Non  
Référentiel utilisé : ☒ HIBC ☐ GS1-128  
Avec les informations :  
Référence : ☒ Oui ☐ Non  
N° de lot : ☒ Oui ☐ Non  
Date de péremption : ☒ Oui ☐ Non

**Utilisation :**

Sécurité d'utilisation : Cf. Notice  
Conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Cf. Notice  
Indications (destination marquage CE) : Cf. Notice

**Fabricant**

Fabricant : US Endoscopy  
Pays : Etats-Unis

**Marquage CE**

Marquage CE accordé par BSI, N° d'organisme : 0086  
Selon la directive Européenne 93/42/CEE  
Produit de classe I, selon la règle 1